

Comment utiliser le stylo prérempli Bemfola



Bemfola vous a été prescrit et ce feuillet d'instructions vous guidera sur la manière d'utiliser le stylo.

Bemfola 75 UI/0,125 ml

Bemfola 150 UI/0,25 ml

Bemfola 225 UI/0,375 ml

Bemfola 300 UI/0,50 ml

Bemfola 450 UI/0,75 ml

Solution pour injection à l'aide d'un stylo prérempli



bemfola
follitropin alfa


Veillez ne pas oublier :

Lavez-vous les mains

Effectuez votre injection tous les jours à peu près à la même heure

Sortez votre stylo du réfrigérateur 5 à 10 minutes avant son utilisation

Les différentes parties de votre stylo

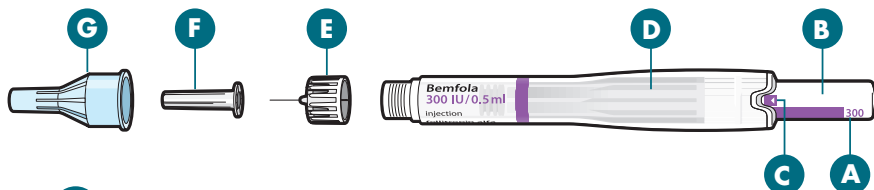

E Aiguille

F Capuchon d'aiguille interne

G Capuchon d'aiguille externe

A Dosage

B Bouton de dosage


C Barre d'activation

D Cartouche avec médicament

Préparer votre stylo

Retirez la languette détachable de l'aiguille d'injection.

Maintenez le stylo comme illustré afin d'éviter d'appuyer sur le bouton de dosage. Fixez l'aiguille en la mettant en place par un clic.

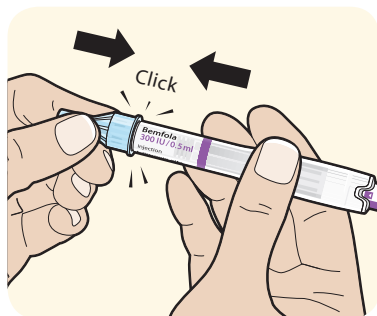


Retirez le capuchon externe de l'aiguille.


Conservez-le pour un usage ultérieur.

Vous en aurez besoin après l'injection.

Retirez le capuchon d'aiguille intérieur.

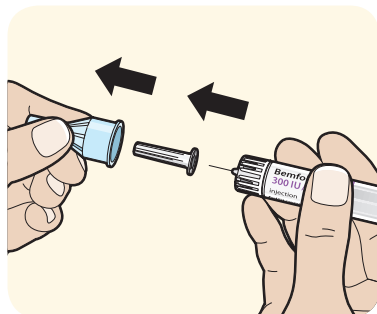


Tenez le stylo de manière à ce que l'aiguille soit dirigée vers le haut.¹
Enfoncez le bouton de dosage jusqu'à ce qu'il s'arrête. La barre d'activation disparaît et un peu de liquide devrait jaillir – c'est normal.²
Si aucun liquide ne jaillit, n'utilisez pas ce stylo et prenez-en un autre.

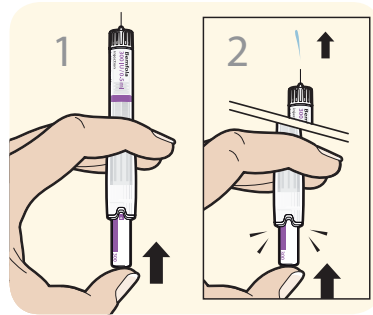


Sélection de la dose

Tournez le bouton de dosage jusqu'à ce que la dose prescrite soit alignée sur la fenêtre de visualisation.
Le stylo est maintenant prêt pour l'injection.

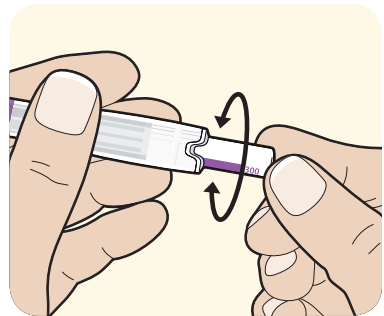


Effectuer vous-même l'injection

Injectez immédiatement le liquide (normalement dans votre ventre) conformément aux instructions de votre médecin ou de votre infirmier/ère. Pincez légèrement la peau de la zone d'injection et introduisez l'aiguille.
Mise en garde ! N'appuyez pas sur le bouton de dosage pendant l'insertion de l'aiguille !

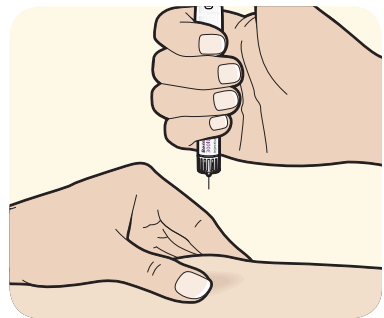


Enfoncez lentement et de manière continue le bouton de dosage jusqu'à ce qu'il s'arrête et que la barre de dosage ait disparu.
Ne retirez pas l'aiguille immédiatement. Attendez 5 secondes avant de la retirer.

Après l'injection : Remplacez le capuchon externe de l'aiguille et déposez l'aiguille usagée dans un récipient fermé (bouteille ou carton de lait) et jetez-le avec les ordures ménagères.
Le reste du matériel usagé doit également être jeté avec les ordures ménagères.

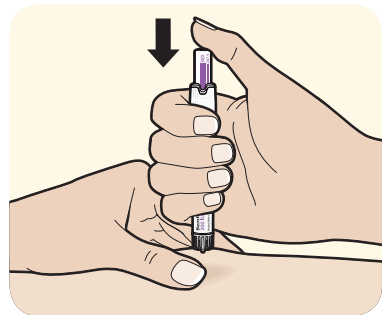

Conserver au réfrigérateur (2°C – 8°C). Ne pas congeler. Peut être retiré du réfrigérateur et maintenu à température ambiante (25°C max.) pendant 90 jours.

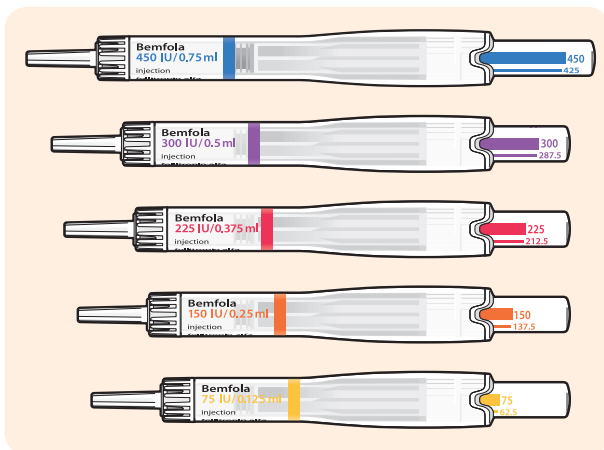

Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

Des informations détaillées sur ce produit sont disponibles sur le site <http://www.ema.europa.eu>

Une vidéo animée explicative est disponible sur www.youtube.com

Pour les pays nordiques, des informations détaillées sur ce produit sont également disponibles, pour chaque pays, sur les sites suivants :

- Suède : www.fass.se
- Finlande : www.laakeinfo.fi
- Danemark : www.ema.europa.eu
- Norvège : www.felleskatalogen.no

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant :

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Hongrie