

Hur man använder Bemfola förfylld engångspenna



Denna broschyr vänder sig till
dig som förskrivits Bemfola.

Bemfola 75 IE/0.125 ml

Bemfola 150 IE/0.25 ml

Bemfola 225 IE/0.375 ml

Bemfola 300 IE/0.50 ml

Bemfola 450 IE/0.75 ml

Injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna



bemfola
follitropin alfa

Att tänka på:

Tvätta händerna

Tag din injektion vid samma tid varje dag

Tag ut pennan ur kylskåpet 5 - 10 minuter innan injektion

Pennans delar



E Nål

F Inre nålskydd

G Yttre nålskydd

A Dosmarkering

B Doseringsknapp


C Dosfönster med aktiveringsmarkering

D Behållare med läkemedel


Förbered din penna för injektion

Dra av pappersskyddet på injektionsnålen. Håll pennan såsom bilden visar för att undvika att trycka på doseringsknappen. Tryck fast nålen på pennan så att den sitter fast ordentligt. Obs! Sätt inte fast den genom att vrida!



Korrekt läge av nålen

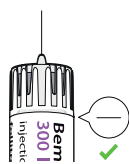

Felaktigt läge av nålen

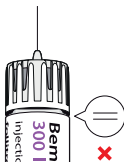


Tag bort både det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre som du behöver efter din injektion.

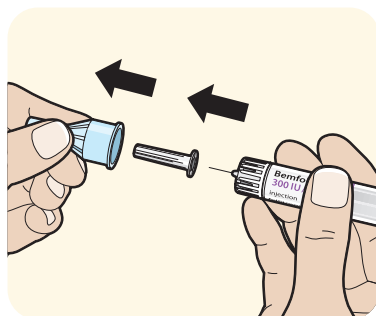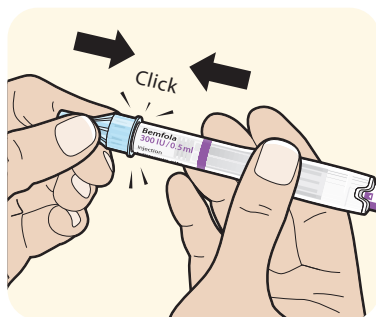

Håll pennan så att nålen pekar uppåt.¹


Tryck på doseringsknappen tills det tar stopp. Aktiveringsmarkeringen försvinner och vätska kommer ut (mängden vätska kan upplevas som stor men det är helt normalt.)²

Obs! Om det ej kommer ut någon vätska alls ska pennan ej användas – tag då en ny penna.

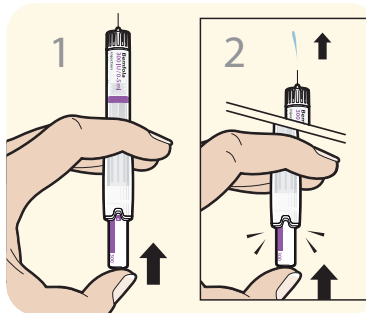


Ställ in dosen

Vrid doseringsknappen tills dess att ordinerad dos är inställd och syns i dosfönstret. Pennan är nu klar för injektion.

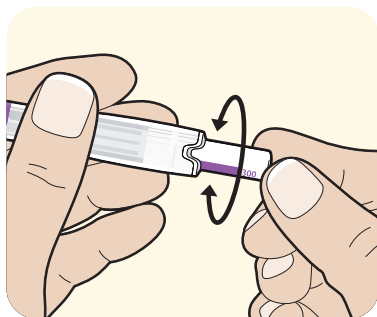


Injicera dosen

Injicera omedelbart lösningen i underhudsfettet (oftast i nedre delen av magen) enligt instruktion från din läkare eller sköterska. Tag ett tag om huden och för in nålen. Obs! Undvik att trycka på doseringsknappen då du sticker in nålen!

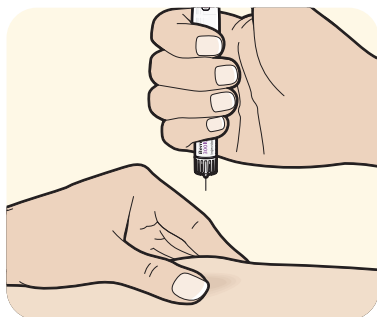


Injicera lösningen genom att trycka in doseringsknappen tills det tar stopp. I dosfönstret syns då endast siffran på den injicerade dosen men själva strecket är ej längre synligt. Släpp taget om huden och vänta 5 sekunder innan du drar ut nålen.

Efter injektionen: Sätt på det yttre nålskyddet på nålen och kasta penna med nål i en behållare avsedd för brännbart avfall (t.ex. en tom mjölk-kartong). Om det finns medicin kvar i pennan ska den lämnas in till ett apotek för destruktion.

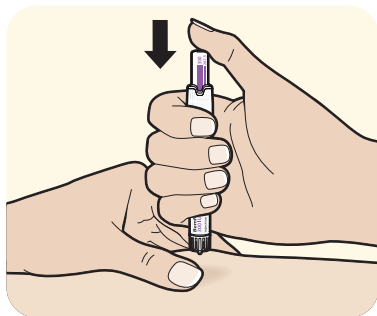

Förvaras i kylskåp (2-8°) Får ej frysas. Kan tas ut ur kylskåpet och förvaras i rumstemperatur (vid högst 25°) i upp till 3 månader och inom hållbarhetstiden.

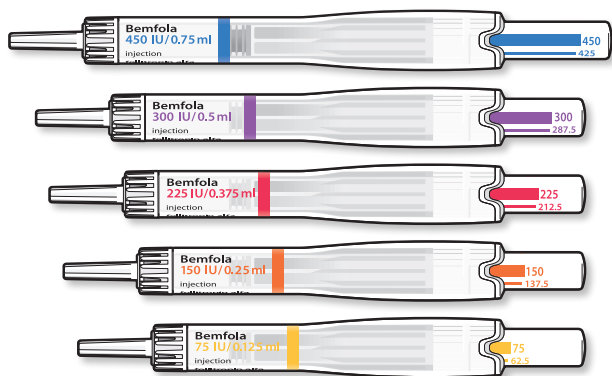

Bemfola 75 IE 0,125 ml	Bemfola 150 IE 0,25 ml	Bemfola 225 IE 0,375 ml	Bemfola 300 IE 0,5 ml	Bemfola 450 IE 0,75 ml
75 IE	150 IE	225 IE	300 IE	450 IE
62,5 IE	137,5 IE	212,5 IE	287,5 IE	425 IE
50 IE	125 IE	200 IE	275 IE	412,5 IE
37,5 IE	112,5 IE	187,5 IE	262,5 IE	400 IE
	100 IE	175 IE	250 IE	375 IE
	87,5 IE	162,5 IE	237,5 IE	350 IE
	75 IE	150 IE	225 IE	337,5 IE
				325 IE
				300 IE

Bemfola (follitropin alfa), injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Receptbelagt läkemedel. Förmånsstatus: (F) Subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl.

Indikation, vuxna kvinnor: Bemfola används för att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor som inte har ägglossning och som inte svarat på behandling med ett läkemedel som kallas "klomifencitrat". Se bipacksedeln för fullständigt användningsområde. **Använd inte Bemfola:** Om du är allergisk mot follikelstimulerande hormon eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel, eller om du har en tumör i hypotalamus eller hypofysen. Bemfola ska inte användas av kvinnor som har stora äggstockar eller vätskefyllda blåsor i äggstockarna av okänt ursprung, som har oförklarlig vaginal blödning, cancer i äggstockar, livmoder eller bröst, eller har ett tillstånd som vanligtvis gör normal graviditet omöjlig.

Läs noga igenom bipacksedel till Bemfola. Den innehåller information som är viktig för dig. För ytterligare information och pris se www.fass.se. Senaste datum för översyn av produktresumén 2018-11-12.

Tillverkare: Gedeon Richter Plc, Gyömrői út 19-21, HU-1103 Budapest, Ungern. Information lämnas av Gedeon Richter Nordics AB, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm. E-post: medinfo.se@gedeonrichter.eu. Telefon: +46 (0)8 611 24 22.



Scanna QR-koden, så kommer du direkt till filmen på medicininstruktioner.se