

روش استفاده از قلم پیش-پر شده Bemfola



برای شما Bemfola تجویز شده است و دستورالعمل استفاده از آن در این برگه درج شده است.



bemfola
follitropin alfa

Bemfola 75 IU/0.125 ml

Bemfola 150 IU/0.25 ml

Bemfola 225 IU/0.375 ml

Bemfola 300 IU/0.50 ml

Bemfola 450 IU/0.75 ml

محلول برای تزریق در قلم پیش-پر شده.


نکات مهم:

دستپایان را بشوید


تزریق را هر روز در زمان معینی انجام دهید

قلم را 5-10 دقیقه پیش از مصرف از یخچال خارج کنید

قسمت‌های مختلف قلم

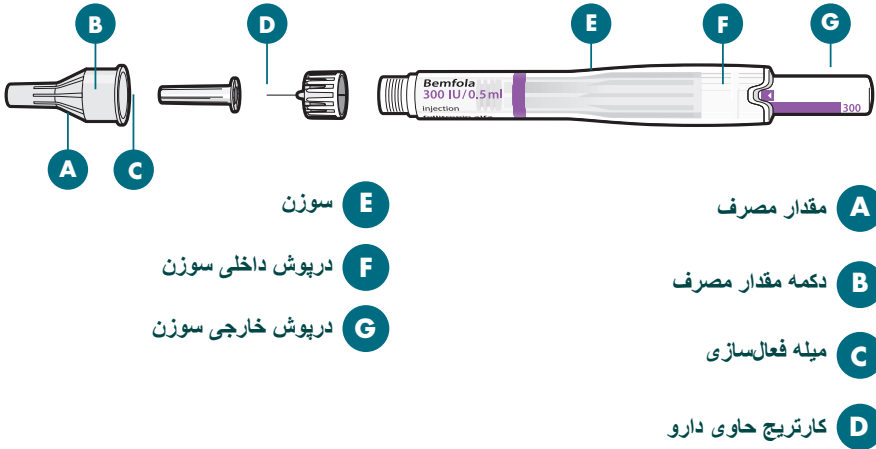




آماده کردن قلم

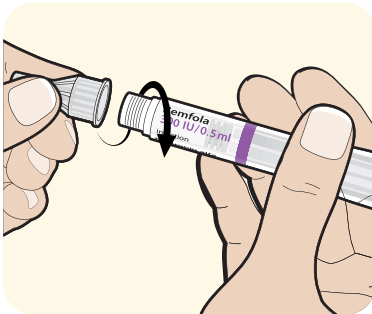


لایه پوششی را از سوزن تزریق خارج کنید.
قلم را از طرفین آن بگیرید و سوزن را با پیچ دادن آن بر روی قلم متصل نمایید.
احتیاط: هنگام متصل کردن سوزن، دکمه‌ی دوز را فشار ندهید.

تسردان تی‌عقوم
نزوس


حی‌حص تی‌عقوم
نزوس

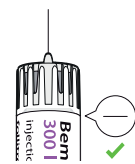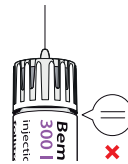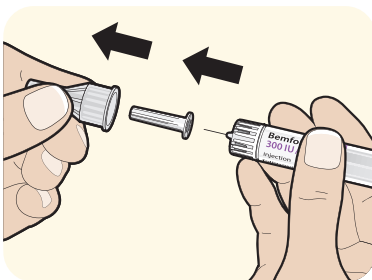

درپوش خارجی سوزن را بردارید. درپوش را نگه دارید.
پس از تزریق به آن نیاز خواهید داشت.
درپوش داخلی سوزن را بردارید.

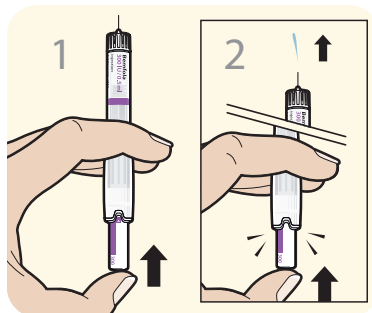


قلم را طوری نگه دارید که سوزن رو به بالا باشد.¹
 دکمه مقدار مصرف را تا انتها فشار دهید.
 میله فعال‌سازی ناپدید می‌شود و مقداری مایع از قلم خارج می‌شود. این وضعیت طبیعی است.² اگر هیچ مایعی خارج نشود، نباید از آن قلم استفاده کنید. قلم دیگری را بردارید.

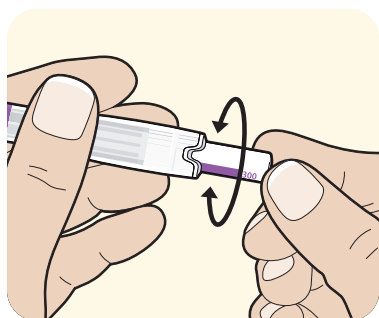


تنظیم مقدار مصرف

دکمه مقدار مصرف را بچرخانید تا مقدار تجویز شده در پنجره نمایش ظاهر شود.
 قلم اکنون آماده تزریق است.

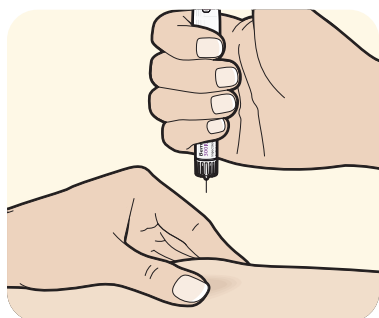


تزریق شخصی

مایع را بلافاصله و طبق دستور العمل پزشک یا پرستار (معمولاً به ناحیه شکم) تزریق کنید. پوست دو طرف ناحیه تزریق را با دو انگشت به‌آرامی فشار دهید و سوزن را درون پوست فرو کنید.
 احتیاط! هنگام فرو کردن سوزن، از فشار دادن دکمه مقدار مصرف بپرهیزید!

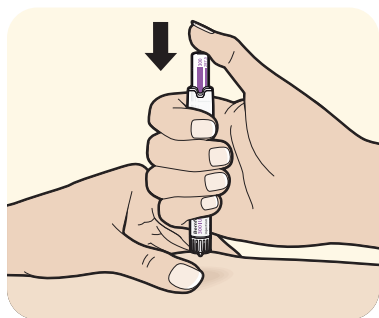

دکمه مقدار مصرف را به‌آرامی و پیوسته تا انتها فشار دهید تا میله مقدار مصرف ناپدید شود.
 سوزن را بلافاصله خارج نکنید. سوزن را پس از 5 ثانیه بیرون بکشید.
 پس از تزریق: درپوش خارجی سوزن را به جای خود بازگردانید و سوزن مصرف‌شده را درون ظرف در بسته (بتری یا ظرف شیر) بیندازید. ظرف را با پسماند خانگی دفع کنید.
 دیگر وسایل مصرف‌شده نیز باید همراه پسماند خانگی دفع شود.

سرد (2°C - 8°C) نگه دارید. محلول نباید منجمد شود. پس از خروج از یخچال، قابل نگهداری است (C° حداکثر 25) مدت 90 روز در دمای اتاق به از مصرف دارویی که تاریخ انقضای آن سپری شده است، خودداری کنید.

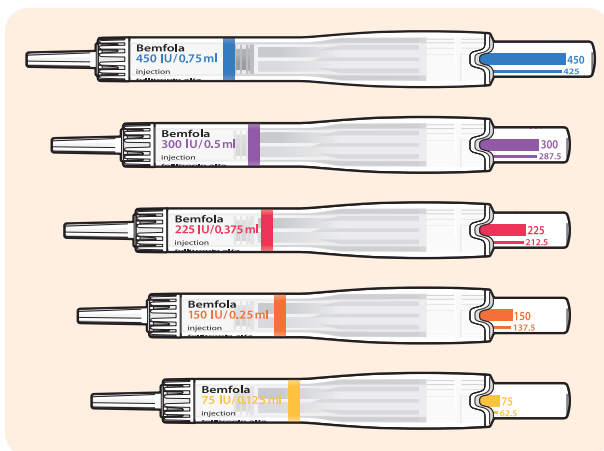

Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

اطلاعات بیشتر درباره این دارو را می‌توانید از <http://www.ema.europa.eu> دریافت کنید
ویدئو پویانمایی حاوی توضیحات را می‌توانید در www.youtube.com تماشا کنید
اطلاعات مشروح محصول برای کشورهای اسکاندیناوی در نشانی‌های زیر در دسترس است:

– سوئد: www.fass.se
– فنلاند: www.laakeinfo.fi
– دانمارک: www.ema.europa.eu
– نروژ: www.felleskatalogen.no

دارنده مجوز بازاریابی و تولیدکننده:

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Hungary