

Kā lietot Bemfola pildspalvveida pilnšļirci



Šajā lietošanas pamācībā ir sniegti norādījumi jums izrakstītā medikamenta Bemfola pildspalvveida pilnšļirces lietošanai.

Bemfola 75 IU/0,125 ml

Bemfola 150 IU/0,25 ml

Bemfola 225 IU/0,375 ml

Bemfola 300 IU/0,50 ml

Bemfola 450 IU/0,75 ml

Šķīdums ievadišanai pildspalvveida pilnšļircē.



bemfola
follitropin alfa


Svarīgi atcerēties!

Nomazgājiet rokas

Veiciet sev injekciju katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Izņemiet pildspalvveida pilnšļirci no ledusskapja
5–10 minūtes pirms lietošanas.

Pildspalvveida pilnšļirces sastāvdaļas

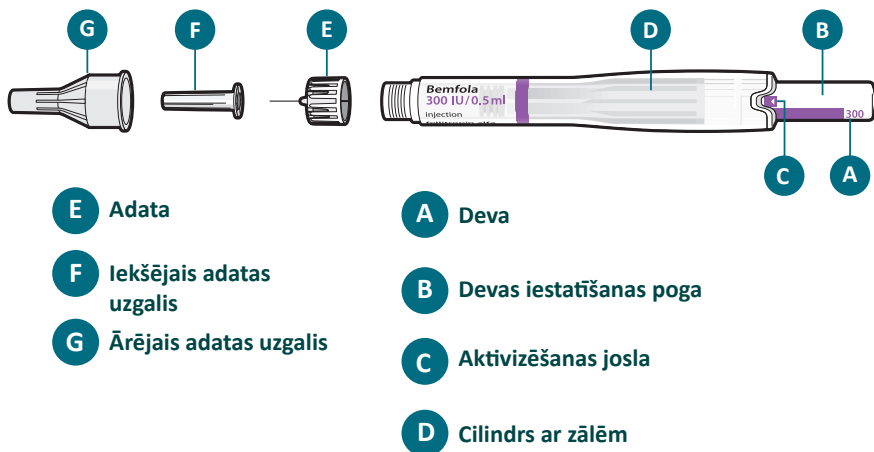


Pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana


Noņemiet noplēšamo plēvi no injekcijas adatas. Turiet pildspalvveida šļirci aiz tās sāniem un pievienojiet adatu, **uzskrūvējot to uz pildspalvveida šļirci.**

Uzmanību! Adatas pievienošanas laikā nenspiediet dozēšanas pogu.

Adata novietota pareizi

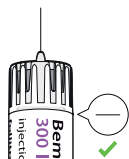



Adata novietota nepareizi

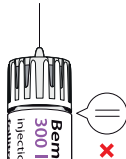

Noņemiet ārējo adatas uzgali. Saglabājiet to vēlākai lietošanai.


Tas būs nepieciešams pēc injekcijas.

Noņemiet iekšējo adatas uzgali.

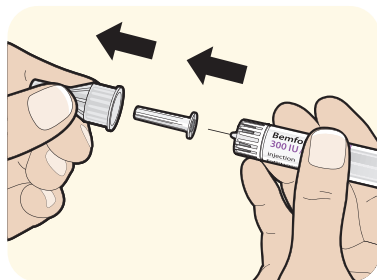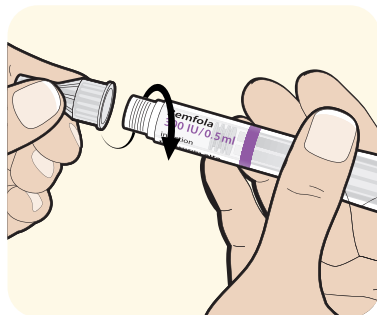


Turiet pildspalvveida pilnšļirci tā, lai adata būtu vērsta uz augšu.¹

Bīdiet devas iestatīšanas pogu, līdz tā apstājas. Aktivizēšanas josla izzūd, un izplūst neliels daudzums šķidruma – tam tā ir jābūt.² Ja šķidrums neizplūst, nelietojiet šo pildspalvveida pilnšļirci, bet gan ņemiet jaunu.

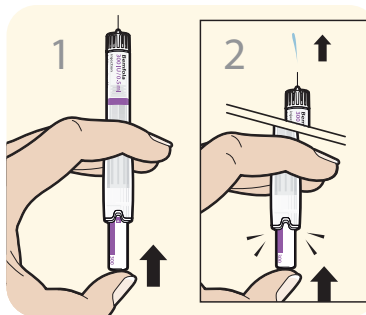


Devas iestatīšana

Pagrieziet devas iestatīšanas pogu, līdz lodziņā redzams, ka sasniegta jums izrakstītā deva. Tagad pildspalvveida pilnšļirce ir sagatavota injekcijai.

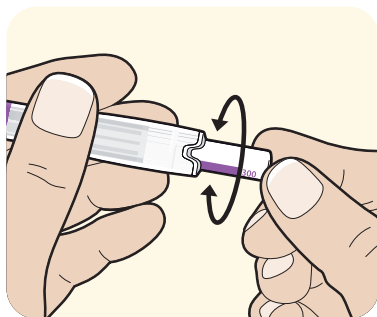

Injicēšana pašam sev


Nekavējoties injicējiet šķidrumu (parasti vēderā) saskaņā ar ārsta vai medmāsas sniegtajiem norādījumiem. Viegli saņemiet ādu injicēšanas apvidū un ievadiet adatu. Uzmanību! Ievadot injekcijas adatu, nepiespiediet devas iestatīšanas pogu!

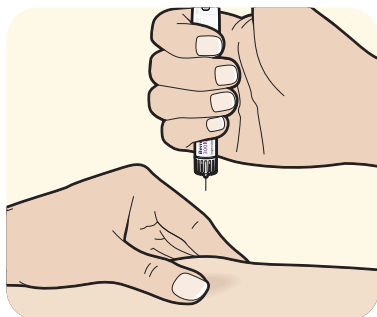


Lēni un nepārtraukti spiediet devas iestatīšanas pogu, līdz tā apstājas un devas josla izzūd. Neizņemiet adatu tūlīt pēc injicēšanas. Pirms adatas izvilkšanas pagaidiet piecas sekundes.

Pēc injekcijas: uzlieciet atpakaļ ārējo adatas uzgali, ievietojiet izmantoto adatu slēgtā traukā (pudelē vai piena pakā) un izmetiet sadzīves atkritumos.

Arī pārējo izmantoto aprīkojumu izmetiet sadzīves atkritumos.

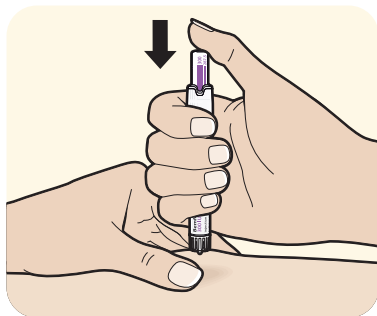

Glabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt. Var izņemt no ledusskapja un 90 dienas uzglabāt istabas temperatūrā (maks. 25°C).

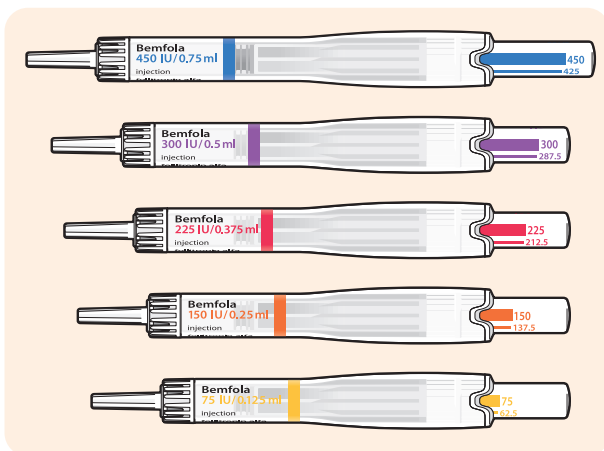

Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

Sīkāka informācija par šo medikamentu ir pieejama vietnē <http://www.ema.europa.eu>

Pilnīgs ilustratīvs video ir pieejams www.youtube.com

Ziemeļvalstīm sīkāka informācija par produktu ir pieejama arī šeit:

- Zviedrija: www.fass.se
- Somija: www.laakeinfo.fi
- Dānija: www.ema.europa.eu
- Norvēģija: www.felleskatalogen.no

Tirdzniecības atļaujas īpašnieks un ražotājs:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešta

Ungārija