

Kaip naudoti užpildytą švirkštiklį Bemfola



Jums paskirtas Bemfola injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje, ir šis instrukcijų lapelis padės atlikti injekciją šiuo švirkštikliu.

Bemfola 75 TV/0,125 ml

Bemfola 150 TV/0,25 ml

Bemfola 225 TV/0,375 ml

Bemfola 300 TV/0,50 ml

Bemfola 450 TV/0,75 ml

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje.



bemfola
follitropin alfa


Ką reikia įsidėmėti

Nusiplaukite rankas.

Švirkškitės injekciją maždaug tuo pačiu paros metu.

Švirkštinį išimkite iš šaldytuvo 5–10 min. prieš naudojimą.

Švirkštiklio dalys

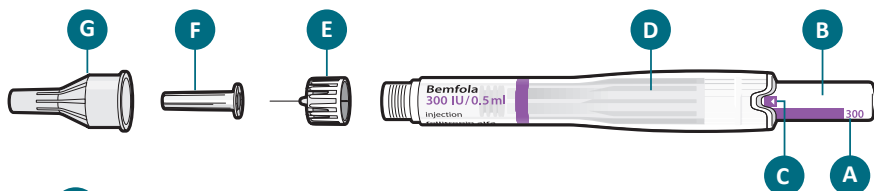

E Adatos

F Vidinis adatos
dangtelis

G Išorinis adatos
dangtelis

A Dozė

B Dozavimo rankenėlė

C Aktyvinimo juosta


D Kasetė su vaistais

Švirkštiklio paruošimas


Nuo injekcijos adatos nulupkite apsauginę plėvelę.
Švirkštinį laikykite už jo šonų ir pritvirtinkite adatą
prisukdami ją prie švirkštiklio.

Perspėjimas. Tvirtindami adatą nespauskite
dozavimo rankenėlės.



Tinkama adatos
padėtis

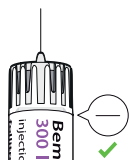

Netinkama adatos
padėtis

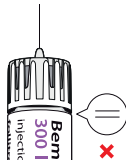


Nuimkite išorinį adatos dangtelį.
Neišmeskite jo.
Jo reikės po injekcijos.
Nuimkite vidinį adatos dangtelį.

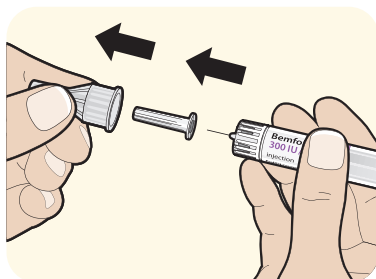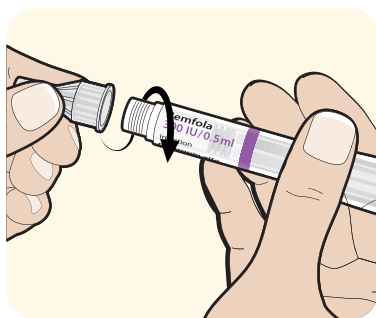

Laikykite švirkštiklį taip, kad adata būtų nukreipta į viršų¹.


Dozavimo rankenėlę stumkite, kol ji sustos. Aktyvinimo juosta išnyks ir išstryks šiek tiek skysčio. Tai normalu². Jei skysčio neišstrykšta, švirkštiklio nenaudokite ir paimkite naują.

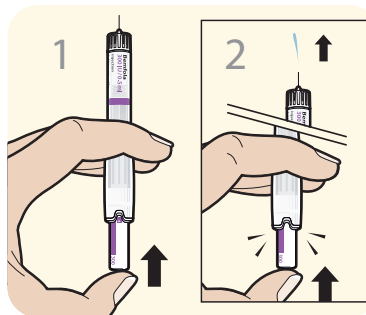

Dozės nustatymas

Sukite dozavimo rankenėlę, kol jums paskirtos dozės rodmuo susilygiuos su langeliu.

Švirkštiklis dabar paruoštas atlikti injekciją.

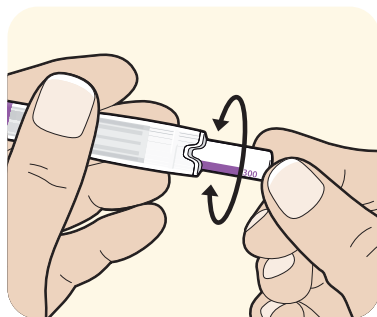

Injekcijos susišvirkštimas

Nedelsdami susišvirkškite skystį (paprastai į pilvą), kaip nurodė gydytojas arba slaugytojas. Lengvai suspauskite odą injekcijos vietoje ir įveskite adatą.



Įspėjimas! Įvesdami adatą nestumkite dozavimo rankenėlės.

Lėtai vienodu tempu stumkite dozavimo rankenėlę, kol ji sustos ir dozės juostelė pradings.


Adatos iškart neištraukite. Prieš ją ištraukdami palaukite 5 sekundes.

Po injekcijos: uždėkite išorinį adatos dangtelį, o panaudotą adatą įdėkite į uždarą indą (buteliuką ar indelį nuo pieno), kurį išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Kitas panaudotas dalis taip pat reikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

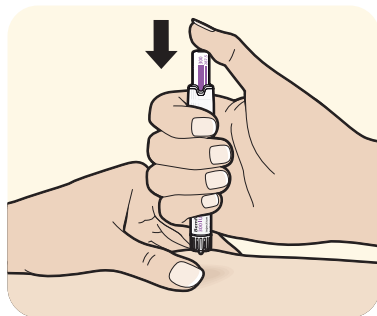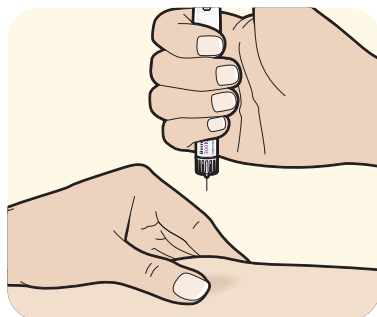

Laikyti šaldytuve (2–8 °C temperatūroje). Neušaldyti. Galima išimti iš šaldytuvo ir kambario temperatūroje (daugiausia 25 °C) laikyti 90 dienų.

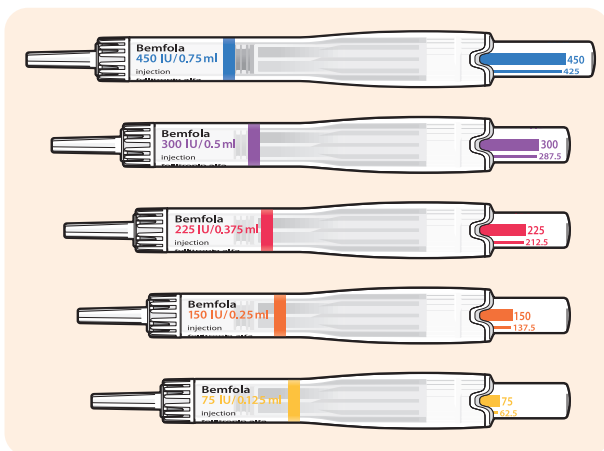

Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

Išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti internete, apsilankę adresu <http://www.ema.europa.eu>

Animacinį vaizdo įrašą galima rasti www.youtube.com

Išsamią informaciją apie produktą taip pat galima rasti šiais adresais (tik Šiaurės šalyse):

- Švedijoje: www.fass.se
- Suomijoje: www.laakeinfo.fi
- Danijoje: www.ema.europa.eu
- Norvegijoje: www.felleskatalogen.no

Registruotojas ir gamintojas:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Vengrija